


DENTAVANTGART

labline

II. ÉVFOLYAM #03 2012. ŐSZ

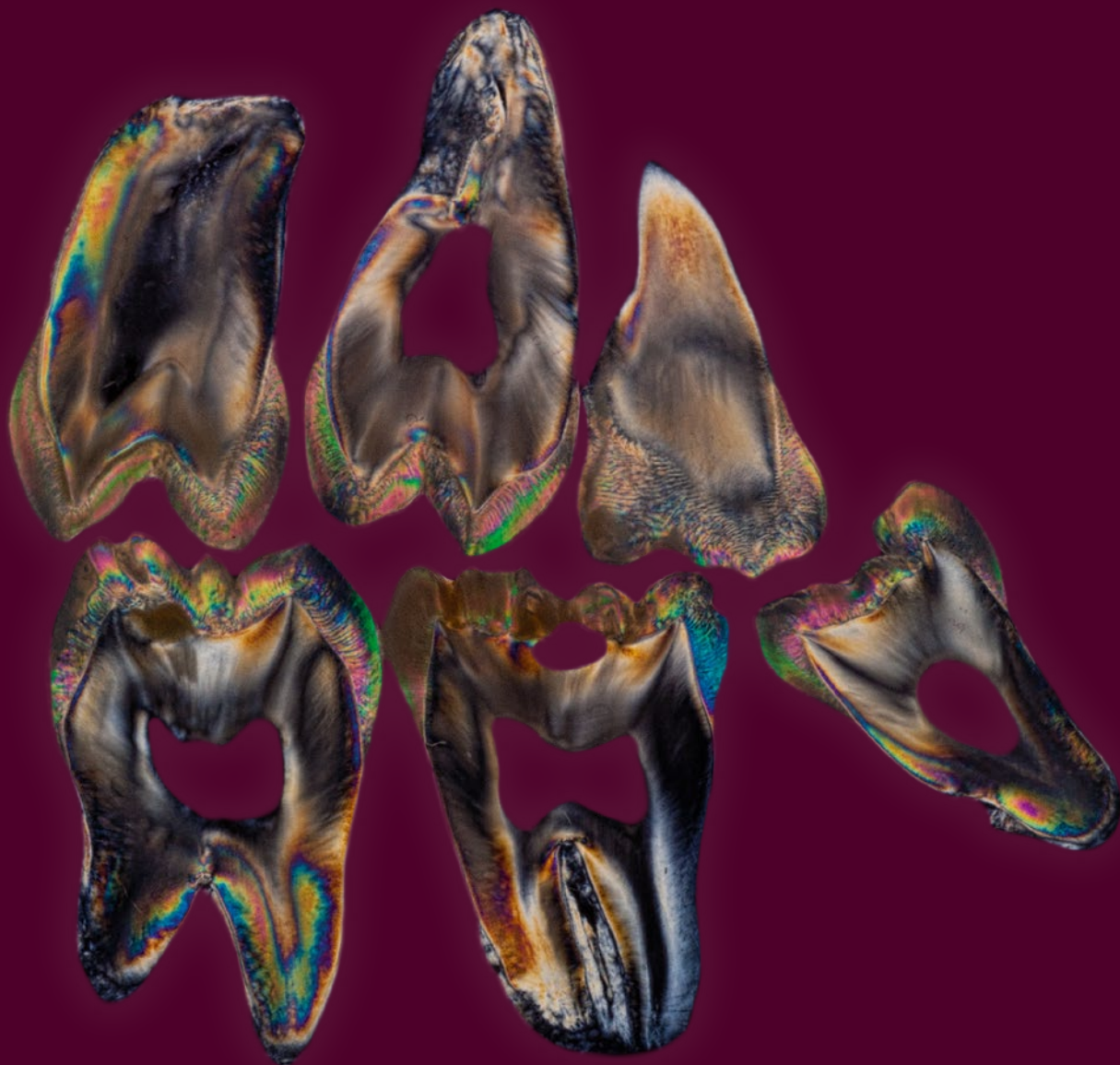

DR. SZERGEI CHIKUNOV

WHITE IMPLANTS ZIRKON IMPLANTÁTUMOK

ÚJ SZÓ A
FRONTFOG
ESZTÉTIKÁBAN

JOSHUA POLANSKY

EGY PÓTLÁS TÖRTÉNETE

KÉPEKBEN
ELMESÉLVE

SIMONE MAFFEI

A FOGÁSZATI FOTOGRÁFIA ALAPJAI

2. RÉSZ



01

A páciens elégedetlensége főképp a két középső nagymetsző esztétikájából fakadt.

Patient presented with his chief complaint being his two maxillary central incisors.

EGY PÓTLÁS TÖRTÉNETE

KÉPEKBEN
ELMESÉLVE

THE STORY OF PROSTHESIS

TOLD IN
PICTURES

Joshua Polansky



02

Egy intraorális felvétel pontosan megmutatja a páciens problémáit.

An Intra-Oral look shows the patients concerns more clearly.



03

A csiszolás megkezdése előtt készített Wax-Up tervről vett szilikonkulccsal ellenőrizzük a csiszolás folyamatát


Preparations are checked off a Wax-Up done prior to the preparation appointment.



04

A páciens előkészítettük a végleges pótlás elkészítéséhez.

The patient prepared to final preparation.

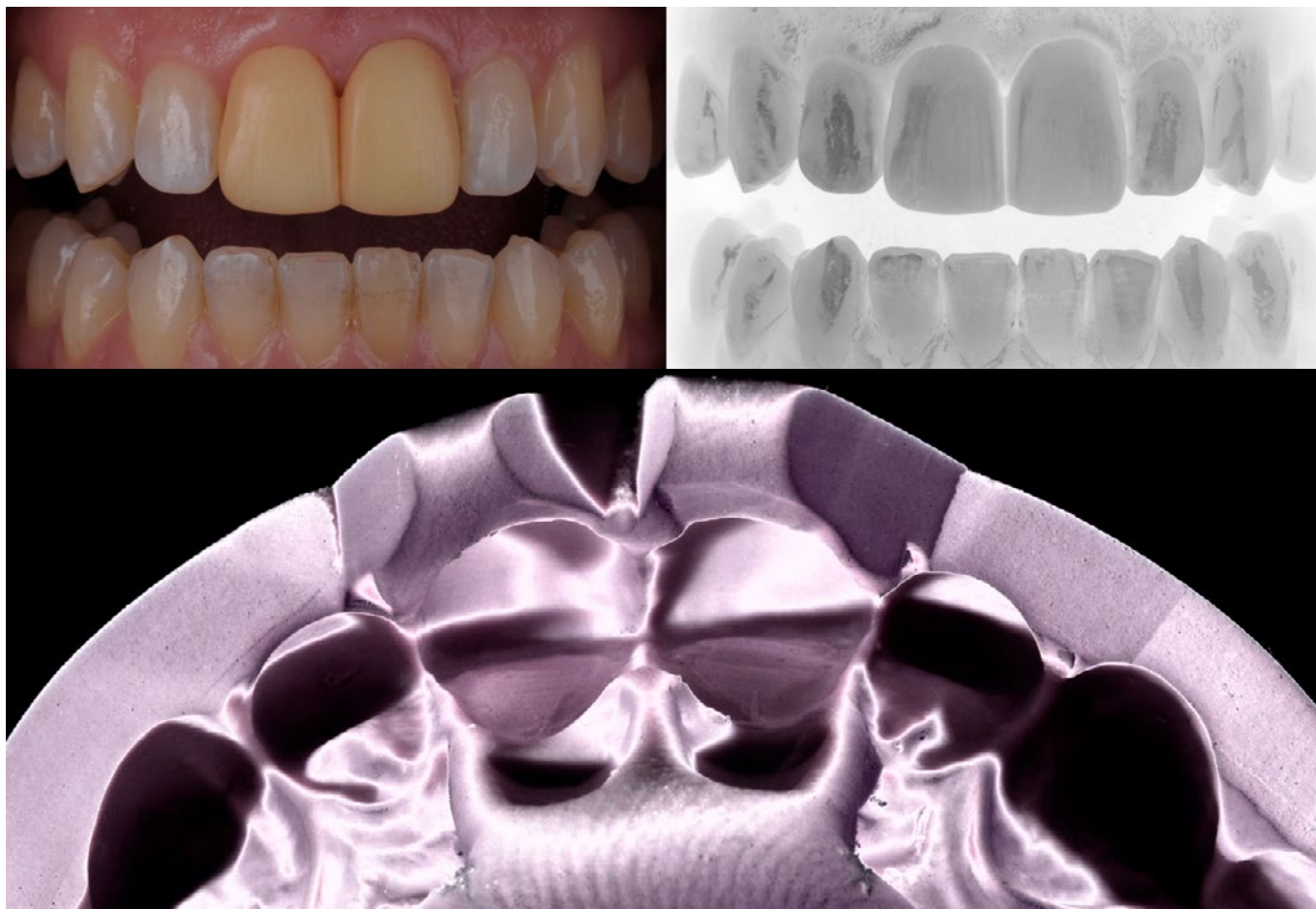

05

A lenyomatot gyorsan kötő gipsszel kiöntjük. A kiöntött mintára Wax-Up-ot injektálunk. Ez a megoldás lehetőséget biztosít a fogászati csapat számára, hogy ellenőrizni tudja a végleges pótlás funkcionális, fonetikai és esztétikai szempontjait még az ideiglenes pótlás elkészülése előtt!

An impression is poured with fast setting stone. Once poured the initial Wax-Up is injected over the preparations. This allows for the dental team to check function, phonetics, and esthetics before the temporary is processed.

06

A véglegesen, minden szempont ellenőrzése alapján elkészített Wax-Up-ról egy matrix segítségével másolatot készítünk.

Once the Wax-Up is finalized a matrix is taken to pick up the final modulation.



07


A dentint (anaxDENT A1) nyomás alatt tartva hagyjuk megkötni.

The dentin (anaxDENT A1) is pressed over the preparations under pressure.

08

A dentint ezután visszavágjuk (cut back), hogy kialakíthassuk a belső rétegeket, ahogy az a természetes fogaknál is megfigyelhető.

The dentin is then cut back to mimic the internal makeup of natural dentition.

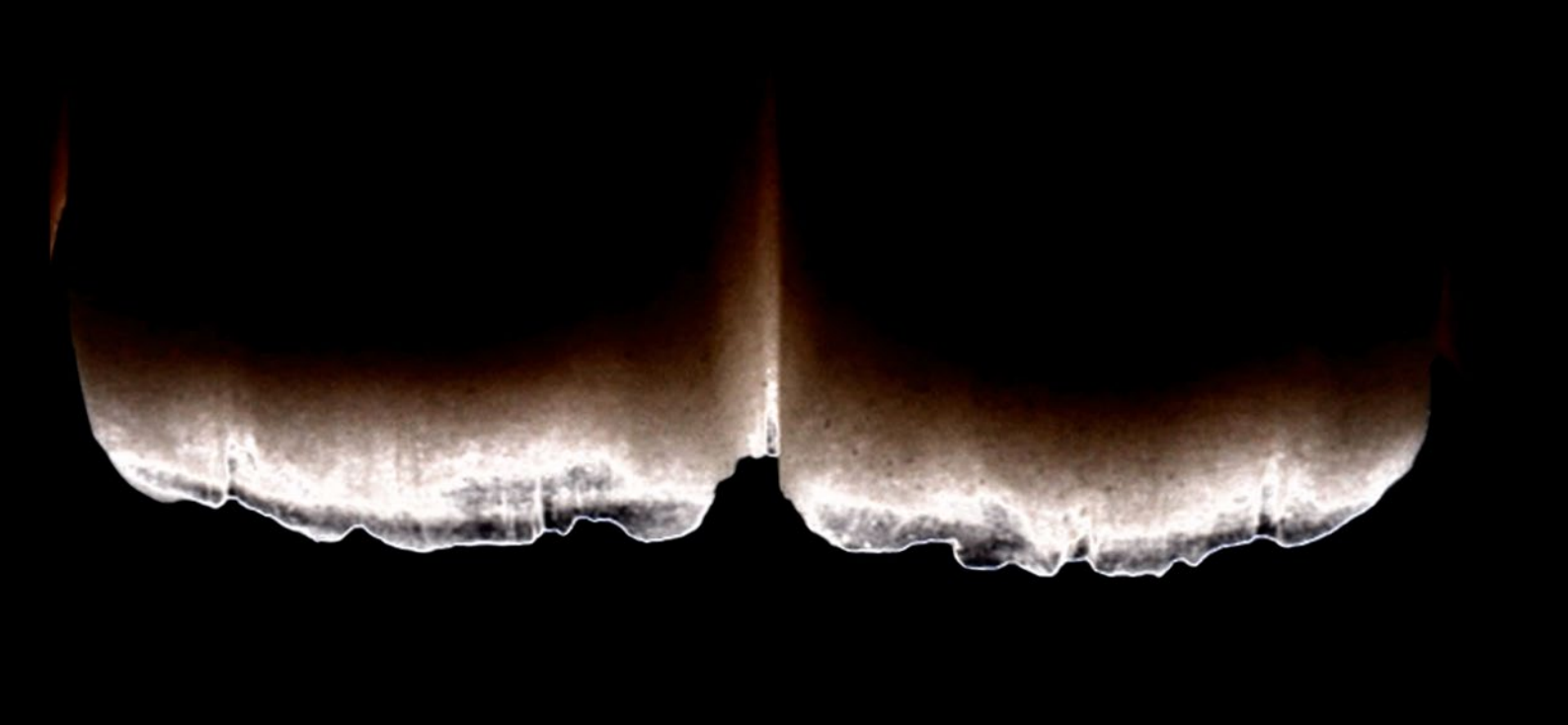

09

Láthatjuk azokat az optikai hatásokat, amellyel az anaxDENT ideiglenes akrylátja rendelkezik.

We can see from the cut back the optical properties the acrylic possesses of anaxDENT.



10

Az élmasszát a visszavágott helyekre juttatjuk és hagyjuk nyomás alatt megkötni. További kisebb kiigazítást el lehet végezni szájban is, ha indokolt.

Enamel is then pressed over the cutback and finished. Minor adjustments can be made intra-orally.

11

Az anaxDENT New-Outline ideiglenes a szájban.

The anaxDENT New-Outline temporary in-situ.



12

A hosszanti irányban kettévágott keresztmetszeti képen jól megfigyelhető az ideiglenes tökéletes illeszkedése.

One can see the precision fit from a cross section.

13

Az anyag jól blokkolja és meggátolja az elszíneződések áttünését az ideiglenes pótláson.

The material also does well blocking out any abutment discoloration's.






14

Minden esztétikai információ, amelyet az ideiglenes pótlás elkészítésekor gyűjtötünk, 100%-ban felhasználható a végleges pótlás elkészítésekor.

With all the esthetic information gathered from the temporary 100 % effort can be put fourth during the layering process.

Amikor a rétegzéssel kialakítottuk a véglegesnek szánt pótlást, akkor azt be lehet ragasztani a páciensnek.

Once layering and finishing is complete the final restorations can be fixed permanently.

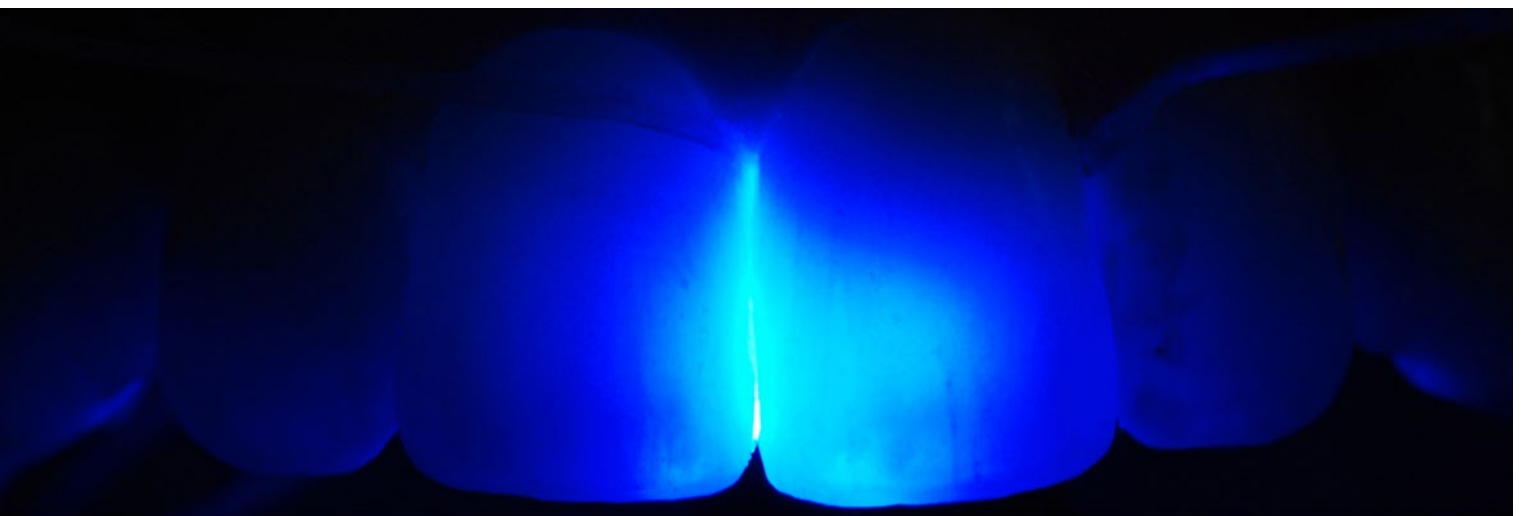



16

A végleges pótlások
in-situ (GC initial Zr).

Final restorations
in-situ (GC initial Zr).



17 a/b

A végleges pótlás száj-
ban, mosoly közben.

The final restorations
in smile.



DentAvantgArt

D i v i s i o n • K f t.



9400 Sopron, Virágölgyi u. 59.
Tel.: +36 99 314-931
Fax: +36 99 318-647
Web & Shop: www.dentavantgart.hu
Mail: info@dentavantgart.hu



facebook

[www.facebook.com/
dentavantgart.division](http://www.facebook.com/dentavantgart.division)

TERÜLETI KÉPVISELŐINK

BUDAPEST

Vakán Csaba
Telefon: +36-30/747-27-20
E-mail: vakan.csaba@dentavantgart.hu

BUDAPEST

Mák Sándorné
Telefon: +36-30/232-99-50
E-mail: mak.sandorne@dentavantgart.hu

É-NY MAGYARORSZÁG

Bíró Gábor
Telefon: +36-30/298-5537
E-mail: biro.gabor@dentavantgart.hu

K-NY MAGYARORSZÁG

Tóth Csaba
Telefon: +36-30/635-0995
E-mail: toth.csaba@dentavantgart.hu

D-NY MAGYARORSZÁG

Skoda István
Telefon: +36-30/217-4606
E-mail: skoda.istvan@dentavantgart.hu

D-K MAGYARORSZÁG

Hitri Fedor
Telefon: +36-30/565-3030
E-mail: hitri.fedor@dentavantgart.hu

SZERVÍZTECHNIKUS

Czencz Sándor
Telefon: +36-20/945-41-26
E-mail: mail@mechanic.hu

PARTNEREINK

ALPHA-LASER | ANAXDENT | CANDULOR | DEKEMA DENTAL | DFS DIAMON | ELEPHANT DENTAL | FREUDING LABORS | GRAMM-DENTAL | HARNISCH+RIETH | JAN LANGNER | KAESER KOMPRESSZOR | KLASSE 4 | MHT S.P.A. SZÁJSZKENNER | M.P.F. ECSE-TEK | PRIMOTEC | REALLOY | REITEL | S.A.M. ARTIKULÁTOR RENDSZEREK | SCHICK-DENTAL | SERVO-DENTAL | SERVO-DENTAL LABLINE | TANAKA DENTAL | WOHLWEND AG - VISION KERÁMIÁK | ZEISER | ZIRKONZAHN | ZUBLER